


MEDIZINTECHNISCHE  
INSTRUMENTE

**EISOLD**

INSTRUMENTE AUS MEISTERHAND – DIREKT VOM HERSTELLER

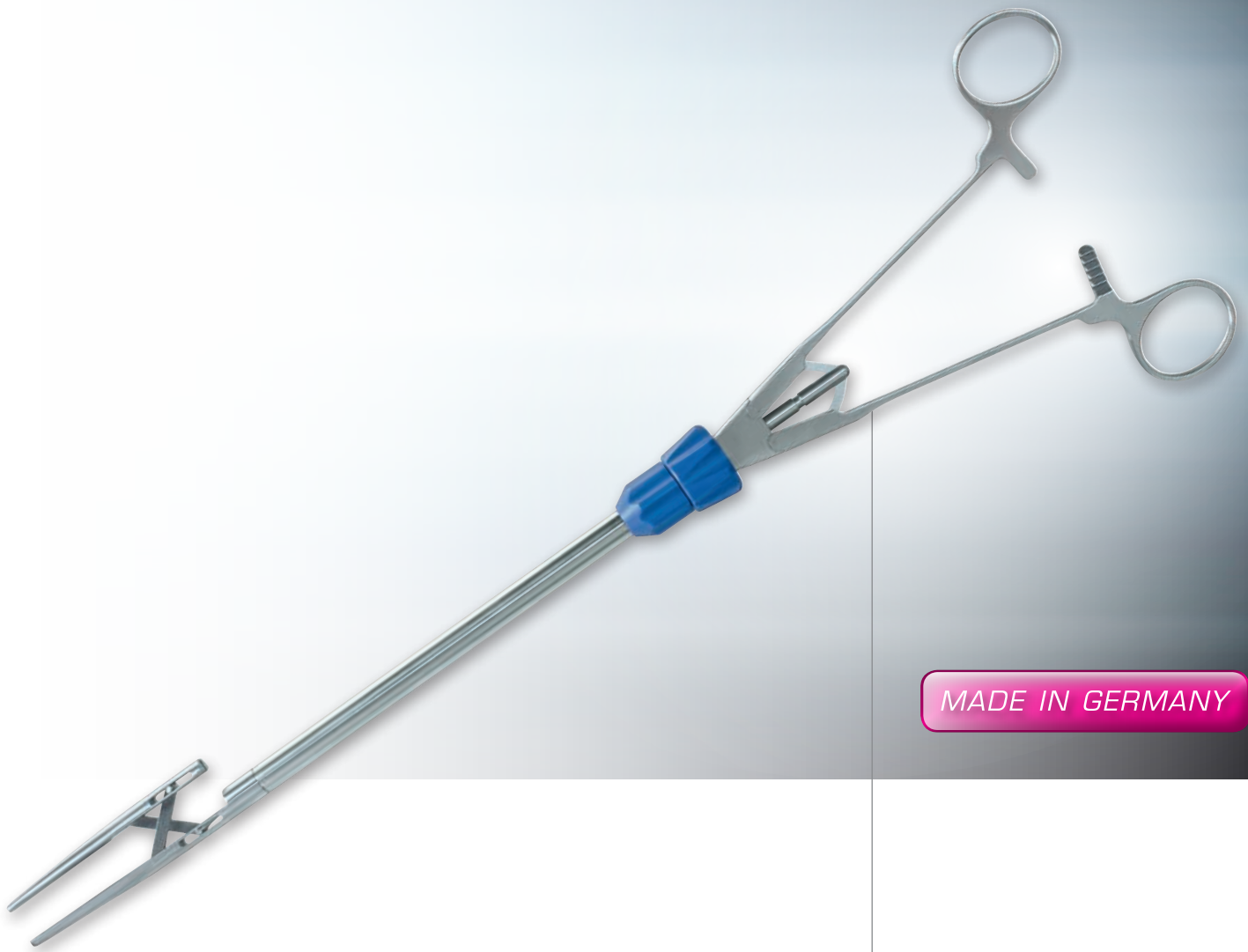

MADE IN GERMANY

## **PARA-FIX**

Parallel schließende Klemme mit  
Ring-Axial-Griff, zerlegbar

Maulteil geschlossen



Schaftlänge (inkl. Maulteil): 230 mm



Max. Öffnung: 15 mm

Schaftdurchmesser: 10 mm



Atraumatische Zahnung

Best.-Nr. 9.000.008



Atraumatisch-gekreuzte Zahnung

Best.-Nr. 9.000.009



Atraumatische Zahnung, gefensterter Maulteil

Best.-Nr. 9.000.010

Maulteil mit Innenzug:

- atraumatisch: Best.-Nr. I-9.000.008


- gekreuzt: Best.-Nr. I-9.000.009

- gefenstert: Best.-Nr. I-9.000.010



Schaft: Best.-Nr. 9.000.012



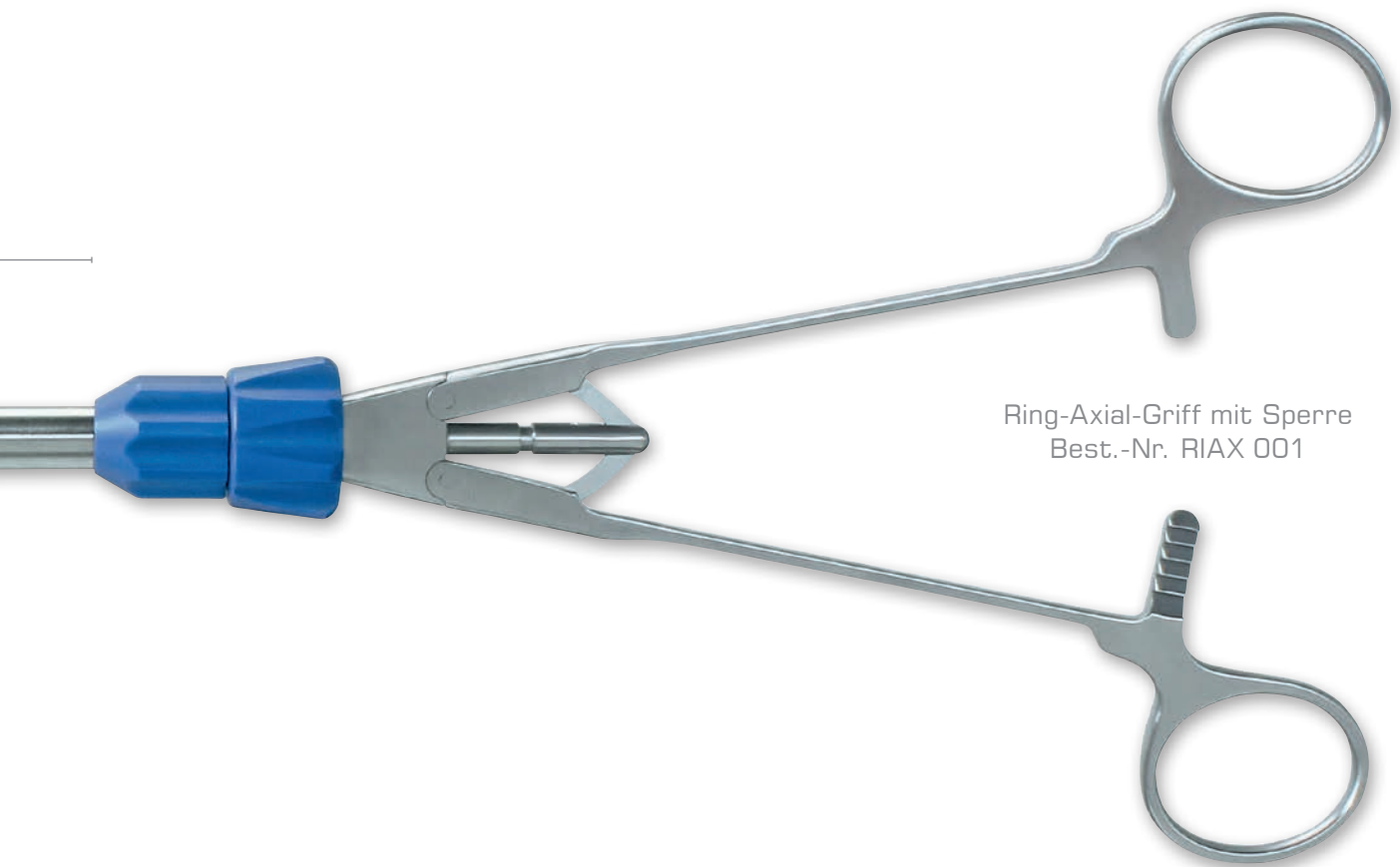

Ring-Axial-Griff mit Sperre  
Best.-Nr. RIAX 001

### ***PARA-FIX, die parallel schließende, zerlegbare Klemme***

Die bewährte Mechanik der parallel schließenden Klemme sorgt für eine direkte und hohe Kraftübertragung. Durch die robuste Konstruktionsweise aus Edelstahl erhöht sich die Lebensdauer des Instruments und es ist leicht und schnell zu reinigen, da es in seine Einzelteile zerlegt werden kann. Alle Einzelteile – Maulteil mit Innenzug, Schaft und Ring-Axial-Griff – sind auch einzeln erhältlich.

EISOLD MEDIZINTECHNISCHE INSTRUMENTE legt größten Wert auf Präzision und Sicherheit in der Anwendung. Strikte Qualitätssicherung, exakte Prüfverfahren und lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleisten einen hohen Produktionsstandard, auf den Sie sich jederzeit verlassen können.

EISOLD MEDIZINTECHNISCHE INSTRUMENTE ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016.

HAUPTSTR. 18a – 20  
78582 BALGHEIM  
GERMANY

TELEFON 0 74 24 – 56 51  
TELEFAX 0 74 24 – 50 14 74

[www.eisold-instruments.de](http://www.eisold-instruments.de)  
[info@eisold-instruments.de](mailto:info@eisold-instruments.de)

---

MEDIZINTECHNISCHE  
I N S T R U M E N T E

---

**EISOLD**

